



Dwa razy więcej wlotów

Zestaw do podłączania dodatkowych wlotów pozwala zwiększyć liczbę portów wlotowych separatora SEP.

Korzyści:

- Oszczędność miejsca – brak konieczności stosowania kilku separatorów
- Możliwość podłączenia kilku urządzeń do jednego separatora SEP
- Łatwy montaż na miejscu



Zestaw do podłączania dodatkowych wlotów

Do użytku z separatorami SEP 120, SEP 360, SEP 900 i SEP 1250

STANDARDOWY separator SEP

do 4 portów wlotowych



Wszystkie standardowe, pojedyncze separatory SEP są wyposażone w jeden kolektor dolotowy, do którego można podłączyć do 4 rur wlotowych.

Zwiększenie liczby portów wlotowych za pomocą zestawu do podłączania dodatkowych wlotów jest bardzo proste:


- 1 Zdjąć łącznik kolankowy.

Z zestawem do podłączania dodatkowych wlotów

do 8 portów wlotowych*



- 2 Podłączyć trójnik w miejscu łącznika kolankowego.
- 3 Przykręcić śrubami drugi kolektor dolotowy.
- 4 Zamocować adapter prosty i czarną rurę.

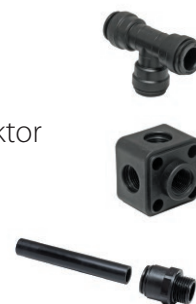

Teraz można podłączyć do czterech dodatkowych rur.

UWAGA: Liczba dostępnych portów wlotowych zależy od umiejscowienia separatora SEP.

* Maksymalna liczba 8 portów wlotowych dotyczy wolnostojącego separatora, którego oba kolektory dolotowe są dostępne.

Zestaw do podłączania dodatkowych wlotów NIE może być stosowany wraz z urządzeniami naściennymi zamocowanymi na uchwycie ściennym SEPURA™ WMB

Informacje dotyczące optymalnego położenia oraz instalacji separatora Sepura™ znaleźć można w dołączonej ulotce.

