




2 Inserire il blocco d'ingresso sul lato da voi prescelto, utilizzando le viti fornite. (Possono essere acquistati blocchi aggiuntivi, se necessario).




3 Inserire il tappo di chiusura grande nel blocco di giunzione che rimane inutilizzato, situato sul lato opposto dell'unità.

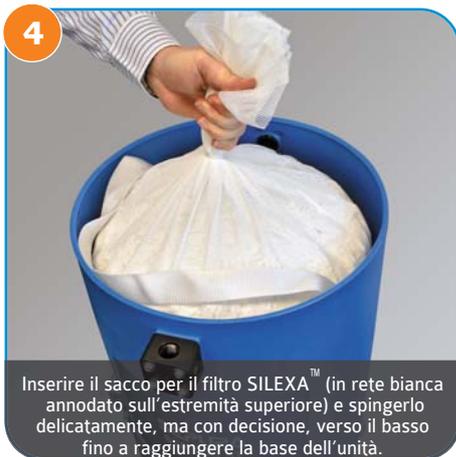

4 Inserire il sacco per il filtro SILEXA™ (in rete bianca annodato sull'estremità superiore) e spingerlo delicatamente, ma con decisione, verso il basso fino a raggiungere la base dell'unità.



5 Inserire la/e molla/e di ritenzione in metallo, con le estremità piegate verso l'alto. Far scorrere verso il basso fino a che non tocca la parte superiore del sacco del filtro. **NON** comprimere il sacco del filtro.

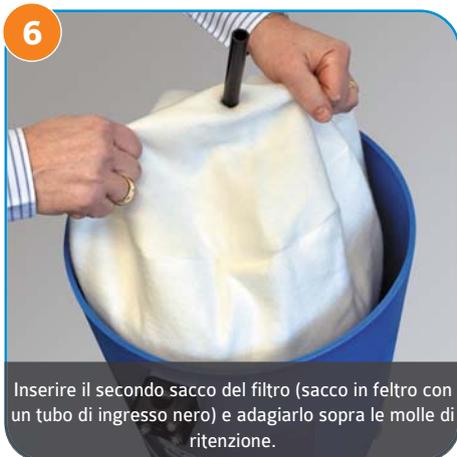

6 Inserire il secondo sacco del filtro (sacco in feltro con un tubo di ingresso nero) e adagiarlo sopra le molle di ritenzione.



7 Avvitare saldamente il connettore d'ingresso (boccola di riduzione) nella sede.



8 Connettere il tubo del filtro al blocco d'ingresso, utilizzando gli accessori forniti.



9 Attaccare la manopola di svitamento nel punto per i test. Attaccare il tubo di uscita al nipplo sovrastante. **Riempire l'unità d'acqua e verificare che non vi siano perdite.**



10 Assemblare e attaccare l'indicatore della vita utile al coperchio dell'unità, utilizzando il buco preforato. **Vedere il retro per maggior informazioni.**



**Completato per
Unità
SEP 120 ST
SEP 360 ST
SEP 900 ST**

Per informazioni sul corretto posizionamento e sull'installazione dell'unità di separazione Sepura, si prega di consultare l'opuscolo allegato.

